




SICAT IMPLANT 2.0 & SICAT BOHRSCHABLONEN

Implantatplanung einfach wie nie zuvor

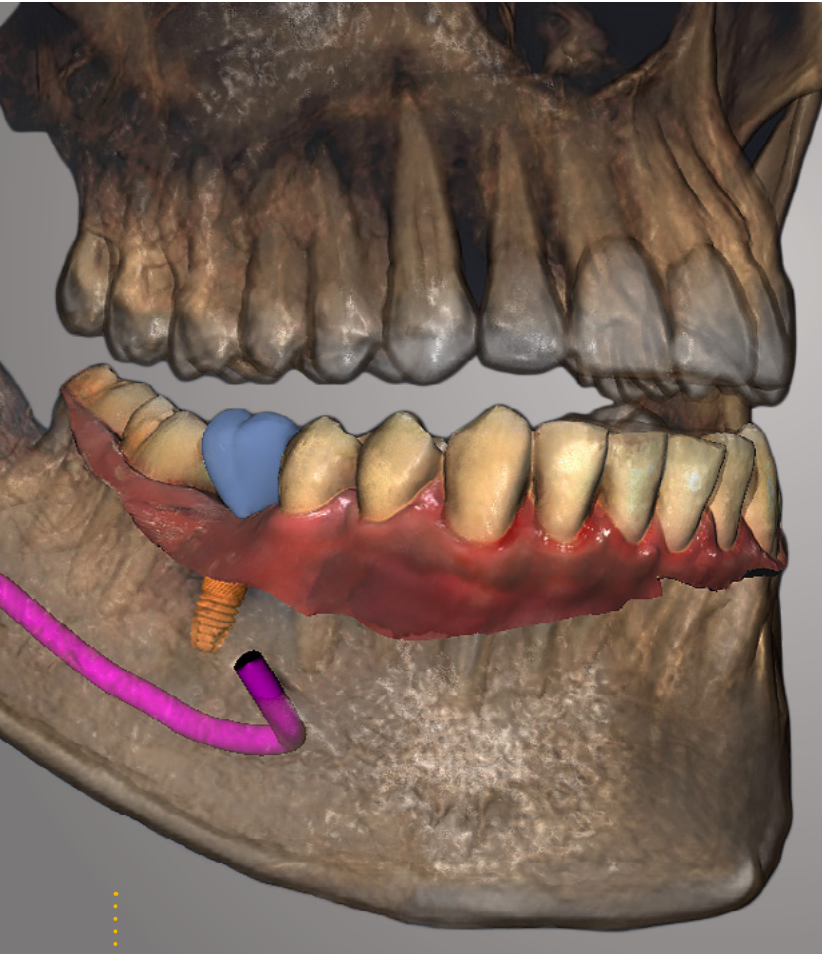

LÖSUNGEN FÜR JEDE PATIENTENSITUATION

DAS SICAT ERFOLGSREZEPT

SEIT ÜBER EINEM JAHRZEHNT liefert SICAT mit anwendungsorientierten Applikationen innovative Lösungen für viele Fachbereiche der digitalen Zahnheilkunde. Mit der SICAT Suite erhalten Sie eine ganzheitliche Lösung, die alle SICAT Applikationen nahtlos integriert.

VON DER 3D-PLANUNG ZUR BOHRSCHABLONE

Mit SICAT Implant 2.0 können Sie Ihre Implantatplanung noch einfacher und schneller durchführen. Bestellen Sie die SICAT Bohrschablonen direkt aus der Software heraus und setzen Sie Ihre Planung gezielt um.

DIGITALE FERTIGUNG – MADE IN GERMANY

SICAT Bohrschablonen und Therapieschienen stehen für höchste Qualität. Denn jede im SICAT Labor gefertigte Schablone wird individuell geprüft mit zertifizierter Genauigkeit. Seit mehr als 15 Jahren!

..... **MADE IN GERMANY** – dahinter steht bei SICAT ein großes Team an Experten mit der Erfahrung von mehr als 250.000 mit Hilfe von SICAT Bohrschablonen gesetzten Implantaten!



EINHEITLICHE BEDIENBARKEIT & REIBUNGSLOSES ZUSAMMENSPIEL GANZHEITLICH BEHANDELN MIT DER SICAT SUITE

INNERHALB DER SICAT SUITE können Sie unterschiedliche Datenquellen wie 3D-Röntgenbilder, optische Abdrücke, Kieferbewegungsaufnahmen und Röntgenzahnfilme gezielt miteinander verknüpfen. Damit bündeln Sie alle relevanten Infos für die Behandlungsplanung an einer Stelle.

DIE GEMEINSAME NUTZUNG von Daten in SICAT Implant, SICAT Air, SICAT Endo und SICAT Function sowie der schnelle Wechsel zwischen den Applikationen helfen Ihnen, Zeit zu sparen – für eine bestmögliche Patientenaufklärung und Therapieplanung.

DER SICAT SUITE WORKFLOW

NAHTLOS VON DER AUFNAHME BIS ZUR UMSETZUNG

1




3D SCAN

2



DIAGNOSE

3

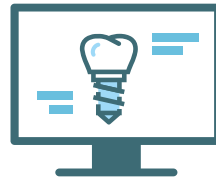

PLANUNG

4



BEHANDLUNG






IMPLANTATPLANUNG 2.0

EINFACHER, SCHNELLER UND INTUITIVER

ERLEBEN SIE DIE WEITERENTWICKLUNG des globalen Branchenführers Galileos Implant auf einem ganz neuen Niveau. Die Planung von Einzelzahn- und Mehrfachversorgung war noch nie so einfach.



DANK HERAUSRAGENDER BENUTZERFÜHRUNG lässt sich jeder Fall noch schneller umsetzen. Intuitiv mit noch weniger Klicks – von der Diagnose über die Implantatplanung bis zur Umsetzung mit Bohrschablonen.

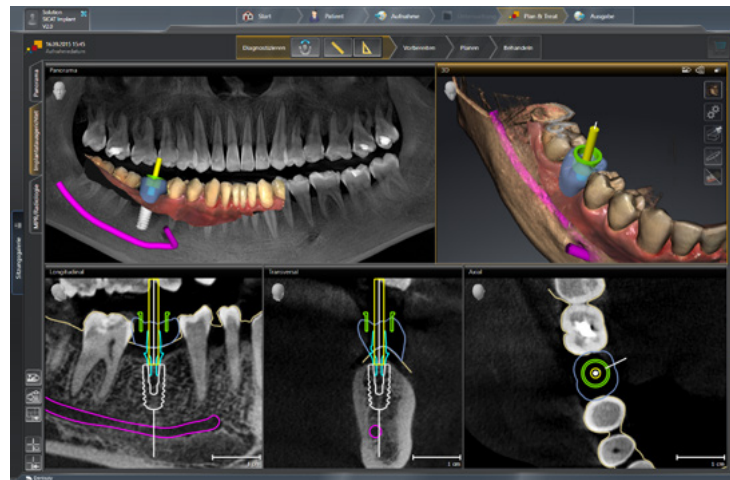

WARUM SICAT IMPLANT 2.0?

Einzigartige Visualisierung & Datenintegration

- Einfaches Matching von 3D-Röntgendaten und optischen Abdrücken, inklusive Restaurationen
- Fotorealistische Darstellung von optischen Abdrücken
- Zahlreiche Visualisierungsoptionen zur Unterstützung bei der Patientenaufklärung

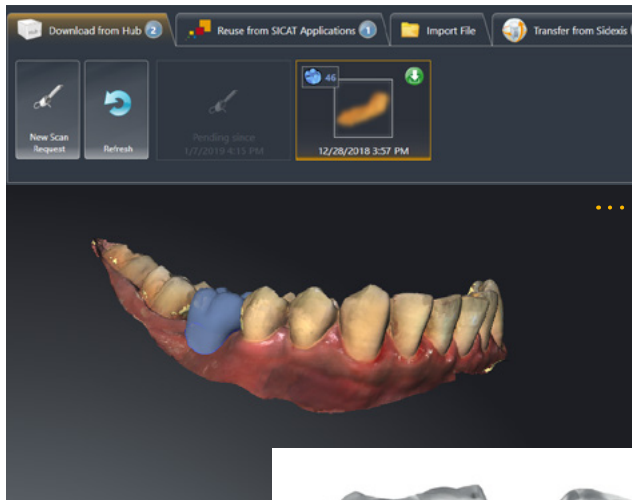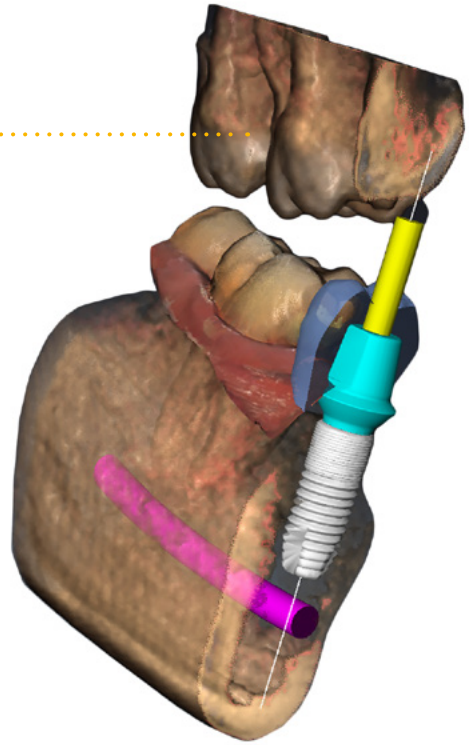



..... **Konnektivität & CAD/CAM auf einem neuen Niveau**

- Applikationsübergreifende Nutzung von Daten
- Bequemer Datenimport aus verschiedenen Quellen, z.B. Dentsply Sirona Hub oder STL-Dateien
- Prothetisch orientierte Implantatplanung
- Weltweit einzige Lösung für die CEREC Guide Planung



Offen, intuitiv & übersichtlich

- Eine der weltweit größten Bibliotheken an Implantaten, Abutments und Bohrhülsen mit integrierter Farbcodierung
- Automatisch vorausgewählte Implantatlänge und -durchmesser basierend auf der Erfahrung von mehr als 250.000 geplanten Implantaten
- Automatisch vorausgerichtete Implantate basierend auf CEREC-Restaurationsachsen

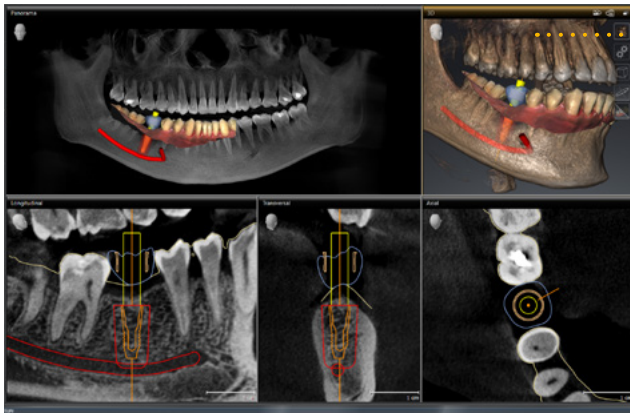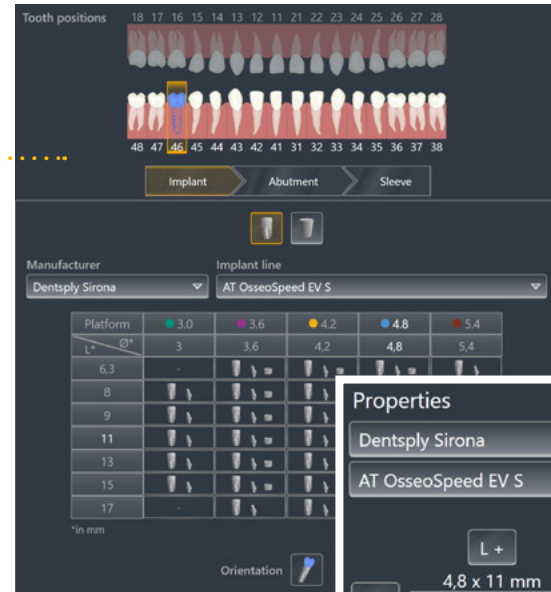

Sicherheit & Vertrauen bis ins kleinste Detail

- Implantat-ausgerichtete Ansichten zur sicheren Evaluierung der Implantatplanung
- Kollisionswarnung zwischen Nerv & Implantat sowie Implantat & Implantat
- Übersichtlicher Planungsreport mit nur einem Klick





SICAT BOHRSCHABLONEN

Eine Vielfalt an Optionen, die überzeugt.

FÜR JEDE VERSORGUNGSSITUATION gibt es bei SICAT eine passende Bohrschablonenvariante – egal ob zahnloser Kiefer oder Metallartefakte im DVT!

SICAT GARANTIERT DABEI für jede gefertigte Bohrschablone eine Genauigkeit von unter 0,5mm am apikalen Ende des Implantats. Dieses Plus an Sicherheit ist einzigartig!



WARUM SICAT BOHRSCHABLONEN?

- **Bohrschablonen für jeden Fall** – von Einzelimplantaten bis zur Versorgung zahnloser Kiefer
- **Große Auswahl an geführten Optionen** – für über 100 verschiedene Implantatsysteme!
- **Lokal oder zentral gefertigt** -Sie entscheiden selbst!
- **Zertifizierte Fertigungsgenauigkeit** – durch präzises Vermessen jeder einzelnen Schablone
- **Umfassende Dokumentation**–durch Bohrschablonen-Report und Bohrprotokoll

Welche Bohrschablone für welchen Fall?

	SICAT CLASSICGUIDE	SICAT OPTIGUIDE	SICAT DIGITALGUIDE
Hergestellt bei SICAT	✓	✓	✗
3D Druck, in der eigenen Praxis oder im Labor ihrer Wahl	✗	✗	✓
Unterstützt sämtliche Implantatsysteme	✓	✓	✓
Auch ohne optische Abdrücke möglich / Mit Gipsmodell	✓	✓	✓
Starke Metallartefakte im DVT zu erwarten	✓	✗	✗
Zahnloser Kiefer	✓	✗	✗
Teilbezahnter Kiefer	✓	✓	✓

WÄHLEN SIE DEN PASSENDEN WORKFLOW FÜR IHREN PATIENTENFALL



HÖCHSTE QUALITÄT – DIGITAL GEFERTIGT

Die SICAT OPTIGUIDE Bohrschablone wird täglich weltweit von Zahnärzten genutzt. Der digitale Workflow ermöglicht Ihnen die Integration optischer Oberflächen-scandaten inkl. Prothetikdesign in SICAT Implant 2.0.

In unserer technischen Eingangskontrolle schauen wir uns jeden individuellen Fall an und Sie erhalten eine höchstpräzise Bohrschablone mit zertifizierter Fertigungsgenauigkeit.



EINE SICHERE WAHL – FÜR JEDEN PATIENTENFALL

Die SICAT CLASSICGUIDE Bohrschablone steht seit mehr als 10 Jahren für höchste Qualität. Sie bietet Ihnen einen bewährten, verlässlichen und höchstpräzisen Prozess genau da, wo digitale Workflows an ihre Grenzen stoßen.

In Kombination mit der gewissenhaften Unterstützung unserer Fachkräfte, eine sichere und höchstpräzise Bohrschablonenvariante.





DIGITALGUIDE

Der SICAT **DIGITALGUIDE** ist die erste SICAT Bohrschablone, die Sie per 3D-Druck selbst oder in einem ausgewählten Labor herstellen können.

Wir liefern das Design, Sie sparen Zeit

- Kostensparender 3D Druck – in der eigenen Praxis oder im Labor Ihrer Wahl
- Plus an Sicherheit – dank individueller Prüfung jedes einzelnen Falls durch die SICAT Experten
- Unterstützung aller gängigen geführten Systeme – komplette Bandbreite an Implantaten, Abutments und Bohrhülsen
- Setzen mehrerer Implantate – keine Beschränkung auf nur ein Implantat



DER SICAT DIGITALGUIDE WORKFLOW



1

**3D SCAN
& OPTISCHER SCAN**



2

DIAGNOSE



3

PLANUNG



4

**CASE CHECK
& DESIGN DURCH SICAT**



5

3D DRUCK



SICAT GMBH & CO. KG
FRIESDORFER STR. 131 – 135
53175 BONN
DEUTSCHLAND

T +49 (0)228 / 286206-0
F +49 (0)228 / 286206-971

INFO@SICAT.COM
WWW.SICAT.DE



70714017 | 206/03-20-DE
DS: A91100-M47-C224
DS: 2360-20002.1